


TWIN / CLICK OFF

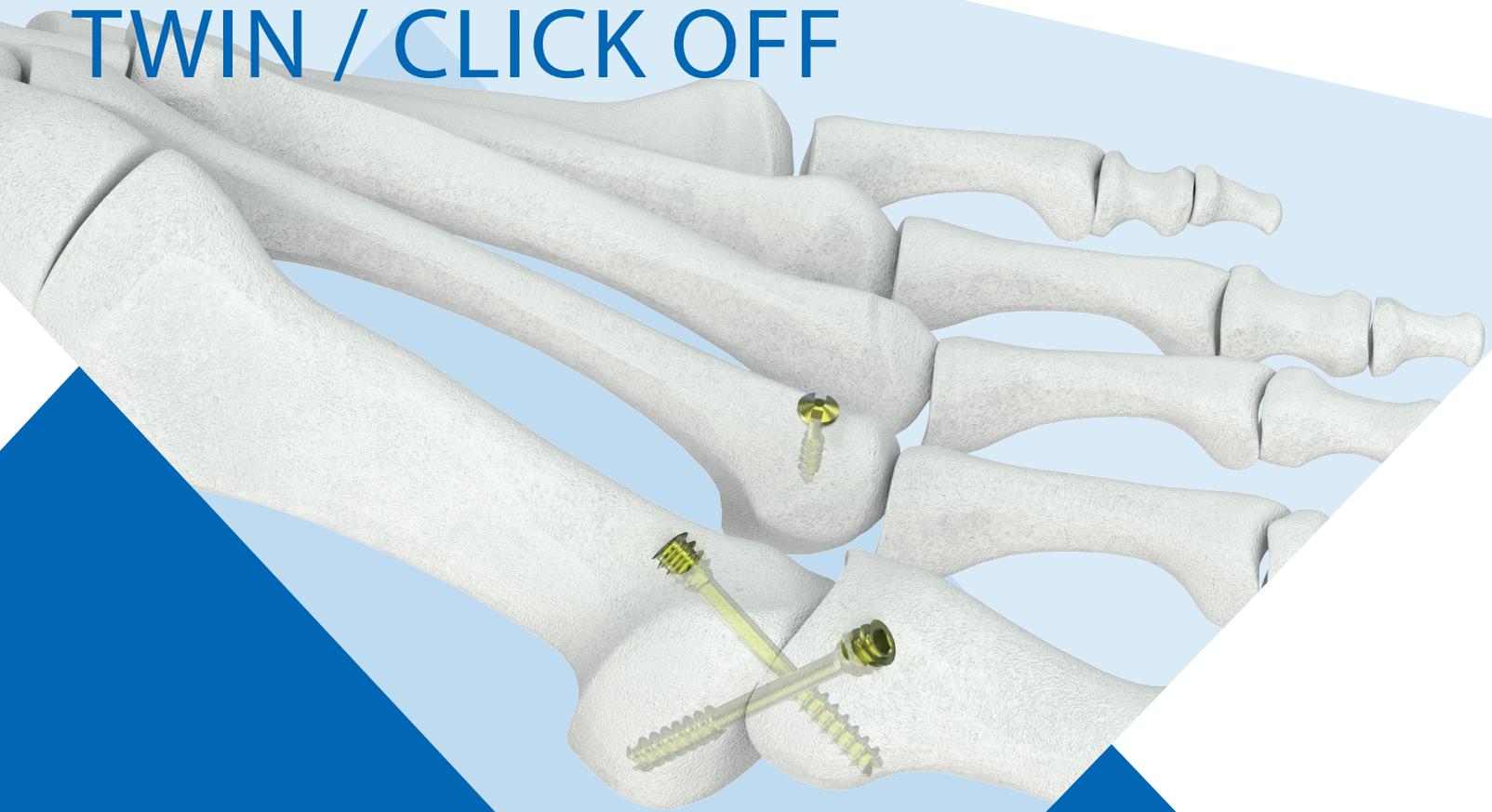

Vorfußschraubensystem

TWIN


Zwei Gewinde, präzise Platzierung, stabile Kompression
Kanülierte Kompressionsschrauben in verschiedenen Durchmessern für ein breites Indikationsspektrum. Die Kompression erfolgt durch unterschiedliche Gewindesteigung an Schraubenkopf und Schraubenspitze. Die Rückschneide erleichtert das Entfernen.

CLICK OFF

Zur Fixierung kleiner Knochenfragmente sowie Osteotomien im Vorfuß. CLICK OFF Schrauben sind selbstbohrend und selbstschneidend. Die Schraube wird direkt in den Knochen eingebracht.


TWIN Kompressionsschraube

Kompression durch
unterschiedliche Gewindesteigungen
am Schraubenkopf und Schraubenspitze

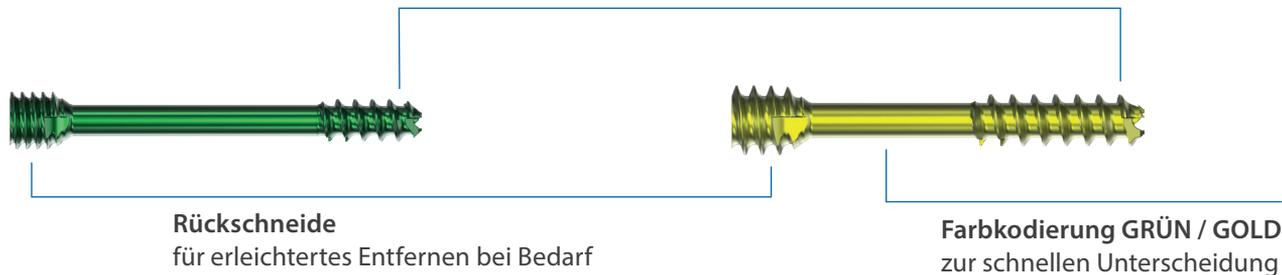


Rückschneide
für erleichtertes Entfernen bei Bedarf

Farbkodierung GRÜN / GOLD
zur schnellen Unterscheidung

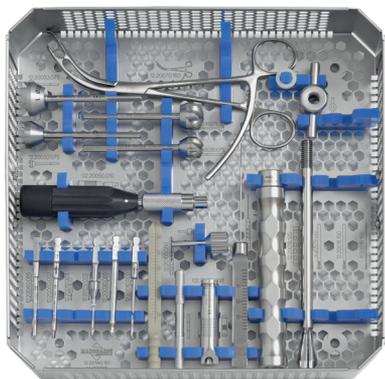

CLICK OFF Schraube

selbstbohrend und selbstschneidend

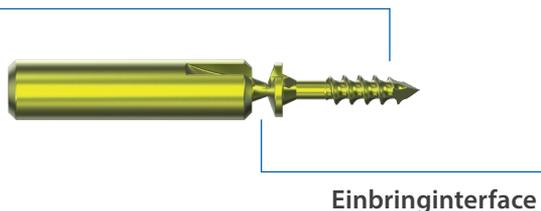

Einbringinterface

TWIN / CLICK OFF Instrumente



TWIN Schraube Ø 2.4 / 3.2 mm, kanüliert

12.03324.xxxS

Gewindeanteil 4 - 13 mm

Länge 12 - 40 mm



TWIN Schraube Ø 3.0 / 4.0 mm, kanüliert

12.03340.xxx(S)

Gewindeanteil 5 - 12 mm

Länge 10 - 40 mm



CLICK OFF Schraube Ø 2.0

12.03402.xxx(S)

Länge 10 - 17 mm



Klammer Ø 1.0 mm

12.91009.xxx(S)

Winkel 90°, 60°

Klammer Ø 1.6 mm

12.91511.xxx(S)

Winkel 90°, 60°

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.